

KAIKO PÖYTÄAUTOKLAAVIT



KAIKO-MELAG PRO CLASS –AUTOKLAAVIT

KAIKO-MELAG Pro Class -autoklaavi on markkinoiden halutuin työkalu pienvälinehuollon steriloitintarpeisiin. B-luokan autoklaavina se on monikäyttöinen, sopien myös onteloisten ja pakattujen instrumenttien luotettavaan sterilointiin.

Valittavana on kaksi kammiokokoa ja kaksi vaihtoehtoista vedenkäsittelyratkaisua.


PRO CLASS –AUTOKLAAVIEN OMINAISUUKSIA

- Helppo käyttöliittymä
- Aikaa säästävä esilämmitystoiminto
- Nopeat ohjelmat
- Hiljainen käyntiäänä
- Tehokas kuivaus
- Kätevä dokumentointi esim. CF-kortilla



HELPPO KÄYTTÖLIITTYMÄ

Suomenkielinen näyttö on käyttäjälle looginen. Laitetta ohjataan neljällä kosketuspainikkeella. Ohjauspaneelin sileä pinta on helppo pitää puhtana.

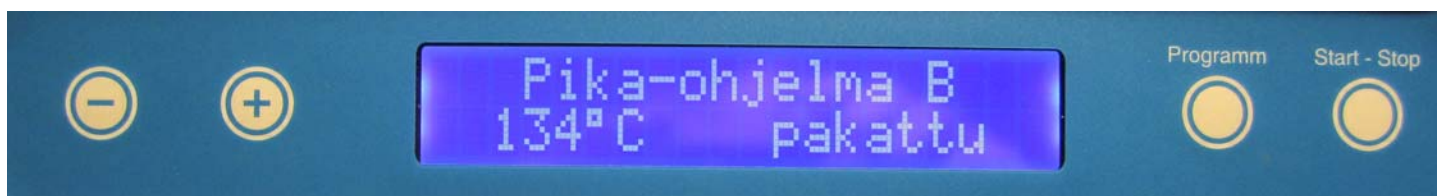

NOPEAT OHJELMAT LUOTETTAVAAN STERILOINTIIN

Pro Class –autoklaaveissa on viisi sterilointiohjelmaa ja kaksi testiohjelmaa:

	Yleisohjelma Pakatut, 134 °C ster.aika 5,5 min	Pikaohjelma B* Ei pak., 134 °C ster.aika 3,5 min	Pikaohjelma S* Ei pak., 134 °C ster.aika 3,5 min	Hellävarainen Pakatut, 121 °C ster.aika 20,5 min	Prioni Pakatut, 134 °C ster.aika 20,5 min
Vacuklav®23 B+ Vacuklav®31 B+	30 min	28 min	15 min	45 min	45 min
Vacuklav®24 B+ Vacuklav®30 B+	30 min	26 min	15 min	40 min	45 min
Kuivausaika	20 min	10 min	5 min	20 min	20 min

*max 1,5 kg pakattuja instrumentteja tai max. Kapasiteetti pakkaamattomia

Pro Class –autoklaavien pulsaava esityhjiö poistaa ilman tehokkaasti autoklaavin kammiosta, Sterilointiin käytettävä vesi on suolavapaata, puhdasta vettä (ionivaihdettua tai RO-vettä). Laadukas vesi takaa häiriöttömän höyryntuotannon, luotettavan sterilointiprosessin ja puhtaan kammion. Kuivaus on tehokasta jälkityhjiön ansiosta.

DOKUMENTOINTI

Testiajojen ja sterilointitulosten dokumentointiin on useita käteviä vaihtoehtoja:

- MELAprint® 42 –paperitulostin
- CF-kortti + MELAflash-lukulaite –tiedot PC:lle
- MELAnet Box –liitettävyys serverille
- MELAssoft-ohjelmisto tiedostojen täydelliseen hallintaan



CF-kortti ja lukulaite



Vacuklav®24 B+ avattuna.
Kuvassa näkyy koriteline ja kuusi
instrumenttitarjotinta.

VEDENKÄSITELY

Vedenkäsittelyvaihtoehtoina säiliö suolavapaalle vedelle "stand alone" -mallit tai vesiliitännä ionin-vaihtopatruunan kautta.

Vacuklav®31 B+ ja Vacuklav®23 B+ sisältävät säiliön suolavapaalle vedelle ja ilmajäähdytyksen. Tämä mahdollistaa laitteen vapaan sijoittamisen haluttuun asennuspaikkaan ja laitteen erittäin taloudellisen käytön. Vain sähköliitäntä tarvitaan. Asennus on vaivatonta.

Vacuklav®30 B+ ja Vacuklav®24 B+ ovat vesiliitäntäisiä. Vedenkäsittely tapahtuu kätevän patruunasuodattimen avulla, mikä säästää välinehuollossa aikaa ja vaivaa. Laadukas ja kestävä, tehokas vesirengastyhjiöpumppu. Ohjelmasyklit ovat nopeita.

TEKNISET TIEDOT

	Vacuklav®30 B+	Vacuklav®31 B+	Vacuklav®24 B+	Vacuklav®23 B+
Vesi	Vesiliitäntä	"Stand alone"	Vesiliitäntä	"Stand alone"
Kammiokoko	35 cm x Ø 25 cm	35 cm x Ø 25 cm	45 cm x Ø 25 cm	45 cm x Ø 25 cm
Kammiotilavuus	17 l	17 l	22 l	22 l
Lastausmäärät	5kg instr./2 kg teks.	5kg instr./1,8 kg teks.	7kg instr./2,5 kg teks.	5kg instr./1,8 kg teks.
Mitat (l x k x s) cm	42,5 x 48,5 x 63 pöytäl. vähint. 50 cm	42,5 x 48,5 x 63 pöytäl. vähint. 50 cm	42,5 x 48,5 x 69 pöytäl. vähint. 60 cm	42,5 x 48,5 x 75 pöytäl. vähint. 60 cm
Paino	45 kg	45 kg	48 kg	50 kg
Sähköliitäntä	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Sähkönkulutus	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW

PAKKAAMINEN

KAIKO Entrhal EM rotaatiosaumaajat ovat lyhyessä ajassa saavuttaneet suuren suosion kaiken kokoisissa välinehuolloissa. Laite on matala ja pienikokoinen, minkä ansiosta rullapöytää ei tarvita. Lämmitysaika vain 1 minuutti. Lämpö-tila 0—200 °C, tarkkuus 2 %.

EM-rotaatiosaumaajan etuja ovat säädettävä kaltevuus ja ergonominen muotoilu. Värikasetin vaihto tapahtuu kätevästi laitteen päältä.

Valittavanasi on kuusi erilaista Entrhal EM -mallia.

KAIKO MELAseal 100+ on pienvälinehuoltoihin sopiva helppokäyttöinen kuumasaumaja. Se on asennettavissa seinälle, mikä säästää pöytätilaa.

Sauman leveys on 10 mm. Laite valvoo automaattisesti saumausaikaa ja lämpötilaa ilmoittaen poikkeamista äänimerkillä.

Laite sisältää leikkurin, jonka avulla pussirullan katkaisu halutun mittaisiksi pakkauksiksi on helppoa. Saatavana on kolme erilaista pidikettä sterilointirullalle: seinäpidike, pöytäteline ja korotettu pöytäteline "comfort".



Entrhal EM 20.



MELAseal 100+ ja rullateline "Comfort".

INDIKAATTORIT

Valikoimastamme löydät myös kaikki tarvittavat indikaattorit steriloinnin valvontaan:

- Bowie Dick –testit
- itiöampullit
- Helix-testit
- prosessi-indikaattorit

Indikaattoriasiakkaanamme Sinulla on mahdollisuus saada käyttöösi Kaikon suosittu Välinehuollon Kansio, joka auttaa välinehuollon indikoinnissa, toteutuksessa ja valvonnassa.

